



SAMI NEWS No.31

動物医療発明研究会 2012 August

6月3日(日)総会が開催されました。今年度の総会は、ミニセミナー付きで、本会員でもあるインターズーさん(渋谷)で行われました。

1. 総会のご報告

臨床の先生7名、企業7名(出版社、製薬会社、ペット関連サービス業、アイデア商品製造販売業、サプリメントの会社など)など、皆でわきあいあいとサンプルやプリント付でなごやかな雰囲気で開催されました。

①会長挨拶

②全員：ミニ自己紹介 お役立ち情報、アピール

③会計報告：決算、予算案、2012年度事業報告(3月内科アカデミーの他、会報年3-4回)別添参照。

④2011年度事業報告：

2月：日本獣医内科学アカデミー参加

会報：5月、8月、12月、3月

⑤ミニセミナー：小暮規夫先生 長柄注射器の作り方(別紙)

浅井フーズ ゲルマニウムと緩和ケア

清水邦一・宏子 内科アカデミーダイジェスト版

ハッピーを見つけよう

心でモチベーションを上げる

インターズーさんの会議室でパワーポイントをお貸りして行われ、注射器の実物を回覧したり、質疑応答も活発に飛び交い充実したひとときでした。

⑥配布資料：注射器の図、歴代のニュースレターの抜粋版

ビーボンさんの歯磨きゴム・傘の板につけるゴム、日本獣医内科学アカデミーのセ

ミナー配布資料などがおみやげになりました。

⑦総会のアンケートのまとめ

- ・臨床の先生が望むものと、メーカーさんとのアイデアや意見交換が定期的に来たら楽しい。
- ・都内だけでなく地方でも総会やミニセミナーを開いて、他の全員も参加できるようにしたい。
- ・会員数、とくに若い人や女性に呼びかけて誘いたい。
- ・初年度は、お試し入会で半額または、無料などで誘う方法も考えてみたらよいのでは。
- ・参加してみて、製造業から小売業の方もいて、臨床の先生方との情報交換もできました。今後の商品開発に役立てたい。
- ・インターズーさんの会場は、パワーポイントやコピーなどがお借りできて時間の融通もきいて有難かった。

⑧ミニ懇親会：引き続きセミナー会場と同じ会議室で、持ち寄りのお菓子、ウーロン茶、ジュースにてティーパーティ形式で懇親会が行われ、短い時間でしたが、会員同士の顔つなぎができました。

⑨石川県の矢田先生より伝言：ネコ便秘症の時に使う、ネコの骨盤腔拡張プレートを、会員の方には、市販の価格より2割引きでおゆずりできます。お申し出ください。また、新型も開発中です。

(Tel 0761-21-5413)

2. 会員からのアイデア

(常に募集中です。会員にお役立ちの投稿なんでもOKです)

皮下点滴するとき輸液量を示す目印

中山 正成 (中山獣医科病院・奈良県)

皮下点滴に通院される患者は多く来院します。この子は 200ml, この子は 300ml, といったように計算して輸液量を個々の患者に合わせています。今まで赤マジックで線を書いていました。この赤い線まで液が来れば呼んでくださいと言います。残った

輸液を別の患者に使用するとき、赤マジックで書いた線を消す作業が必要でした。

そこでアイデア！

赤マジックで書く線の代わりに、ビニールテープを三角形に切って輸液バッグの目的の部位に貼るようになりました。目印としてオーナーには解りやすく、よりスマートになりました。



バイアルカバー

中山 正成（中山獣医科病院・奈良県）

使用中のバイアルはどのように保管していますか？ゴム栓の部分が不潔にならないように気を使っていますか？

以前は、プラスチック製のキャップが付属していましたが最近はありませんね。

「そこでアイデア！」

注射用蒸留水が入っているプラスチック製の容器を半分に切ってバイアルや使いさ

しのブドウ糖の容器のカバーにしています。汚れば捨てて新しいものに代えます。まさにエコです。



注射用蒸留水が入っているプラスチック製の容器を半分に切ってバイアルや使いさしのブドウ糖の容器のカバーにしています



動物医療発明研究会のホームページができています。会員の登録をできます。

会員の病院・施設名、〒、住所、TEL、FAX、ホームページ URL を掲載します。

ご希望の場合は、件名に「SAMI-HP 掲載希望」と明記して、データをメールにて

hp@ispecial.co.jp (ホームページ運営受託：株式会社アイ・スペシャル) へお送りください。



SAMI NEWS 31号

発行日 2012年8月5日

発行所 動物医療発明研究会事務局

発行人 会長 清水 邦一

編集人 伊藤 隆

事務局 230-0061 横浜市鶴見区佃野町3-3

清水動物病院内

TEL(045)583-3738 FAX(045)583-3594

長柄注射器

小暮 規夫 (小暮動物病院)
〒112 東京都文京区小石川 5-40-2


【材 料】

- ①アルミパイプ 外径：15 mm / 長さ：100cm 1本
(内径：1 mm) 外径：5 mm / 長さ：100cm 1本
- ②バネ (スプリング) 15mm径 / 5cm 1個
- ③ガス用 ゴムホース固定用クランプ 1個
- ④ディスポ注射器 10 ml / 5 ml / 1 ml (ワベルクリン) 各1本 (使用済みで可)
- ⑤輸液用チューブセットの点滴筒 1個 (使用済みで可)


【工具など】

金切ノコ刃、ハサミ、カッターナイフ、瞬間接着剤、もめん糸、

注射器本体の構造

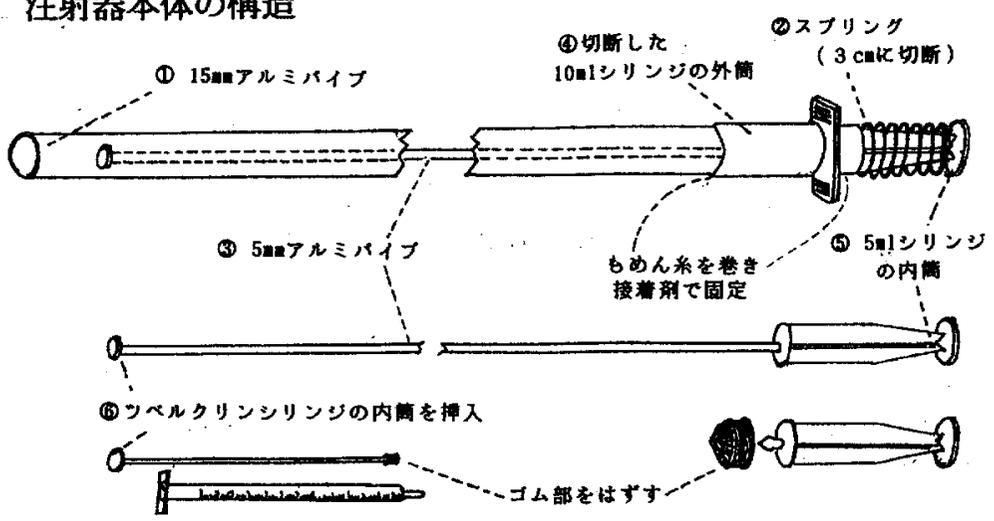

シリンジ装着部のキャップの作り方

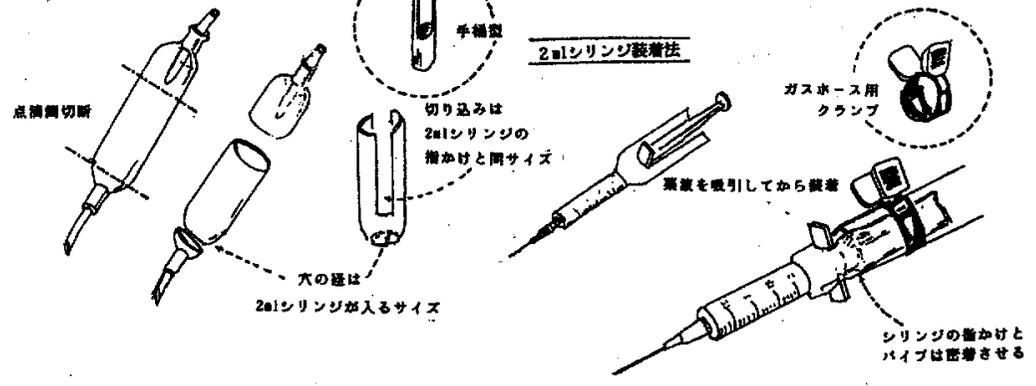

針つき縫合糸の作り方

宮本 文朗 (宮本犬猫病院・香川県)

糸付き縫合針の作り方

- 上から ①外径 12mm のアルミパイプ (パイプカッターで溝を彫っていますがなくても可)
②墨つぼの部品(売っています)or 画鋲 (針内側のバリを取るため)
③やすり(針を切るため。傷を付けて折る)
④ペンチ(小さく持ちやすい、軽い力で作動)



ペンチでアルミパイプと針を一緒に挟んで固定して、手で曲げる。



針にやすりで傷を付け、1,2回折り曲げると折れます。

針の内側にバリがあれば糸が入らないので②を使って滑らかにする。 同じ要領で糸を入れ、瞬間接着剤を毛細管現象を利用して流し込みます。

